



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: *ΚΡΕΒΑΤΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ
ΤΥΠΟΥ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΠΟΛΥΣΠΑΣΤΟ*

NÁVOD NA POUŽITIE: *MANUÁLNA NEMOCNIČNÁ
POSTEL' 2- FUNKCIE*



REF :0805424



Distribútor: VELCON spol. s r.o.
Továrenská 368/40, 976 31 Vlkánová

Preklad návodu na použitie zabezpečil distribútor VELCON spol. s r.o.

ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ:

Το κρεβάτι 0805424 χρησιμοποιείται για ασθενείς που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας και χρειάζεται να μείνουν ξαπλωμένοι στο κρεβάτι.

Είναι σχεδιασμένο για άτομα που πρέπει νοσηλευτούν για λόγους υγείας ή αναπηρίας σε οίκους ευγηρίας, νοσοκομειακά ιδρύματα ή και σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης. Επίσης σχεδιάσθηκε σαν άνετη λύση για την κατ' οίκον περίθαλψη ανθρώπων που χρειάζονται φροντίδα. Σκοπός του είναι να υποστηρίξει αυτή την περίθαλψη.





ΠΡΟΣΟΧΗ (!):

- Σε περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβλημα **MHN** χρησιμοποιείτε το προϊόν μέχρι να αποκατασταθεί & επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο και εκπαιδευμένο αντιπρόσωπο
- Η χρήση του εν λόγω προϊόντος απαγορεύεται για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που ορίζονται στο παρόν εγχειρίδιο
- Η MOBIAC A.E απορρίπτει κάθε ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση του προϊόντος ή χρήση άλλη από αυτή που αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο.
- Η MOBIAC A.E διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στο προϊόν και στο ακόλουθο εγχειρίδιο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, προκειμένου να βελτιώσει τα χαρακτηριστικά του.
- Υπάρχει Πιθανότητα Απόκλισης των Διαστάσεων των Προϊόντων Εύρους $\pm 3\%$.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το προϊόν αυτό ή οποιονδήποτε διαθέσιμο προαιρετικό εξοπλισμό, εάν δεν έχετε πρώτα διαβάσει και κατανοήσει πλήρως το παρόν εγχειρίδιο χρήσης.
Εάν αδυνατείτε να κατανοήσετε τις προειδοποιήσεις, τις προφυλάξεις ή τις οδηγίες, επικοινωνήστε με έναν επαγγελματία υγείας, αντιπρόσωπο ή το τεχνικό προσωπικό πριν επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή βλάβη.
- Φυλάσσετε το προϊόν μακριά από πηγές θερμότητας.
- Να φυλάξετε το παρόν έντυπο για μελλοντική χρήση.
- Να είστε προσεκτικοί όταν τα παιδιά είναι κοντά και ΜΗΝ αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με το προϊόν.
- Να μην υπερβαίνετε το μέγιστο ωφέλιμο φορτίο.
- Απαιτείται πάντα ιδιαίτερη προσοχή εκεί που υπάρχουν κινούμενα μέρη που μπορούν να προκαλέσουν παγίδευση των άκρων και τραυματισμούς
- Μην επιχειρήσετε να σηκώσετε το προϊόν από οποιοδήποτε συναρμολογούμενο μέρος.

ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΩΣΤΗΣ ΚΑΙ ΛΑΘΑΣΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

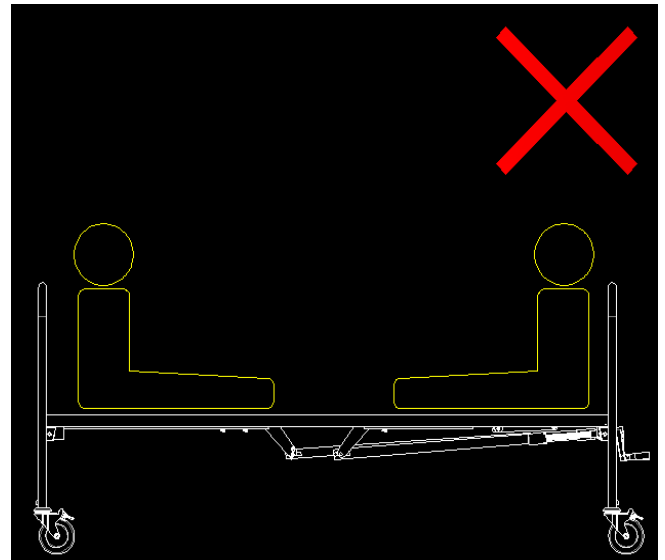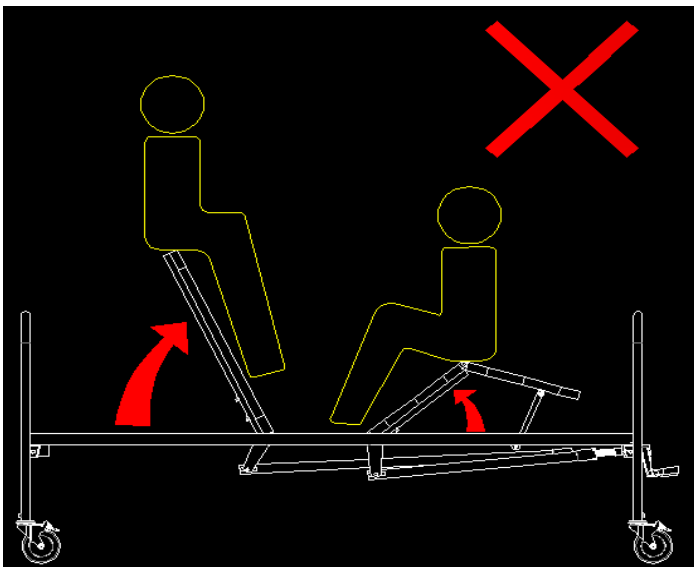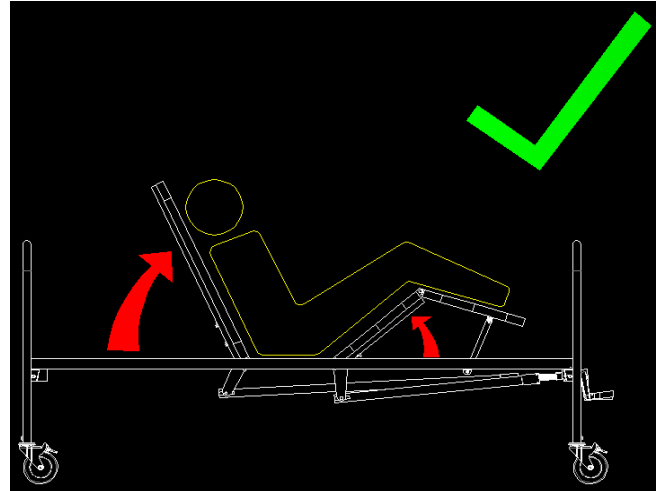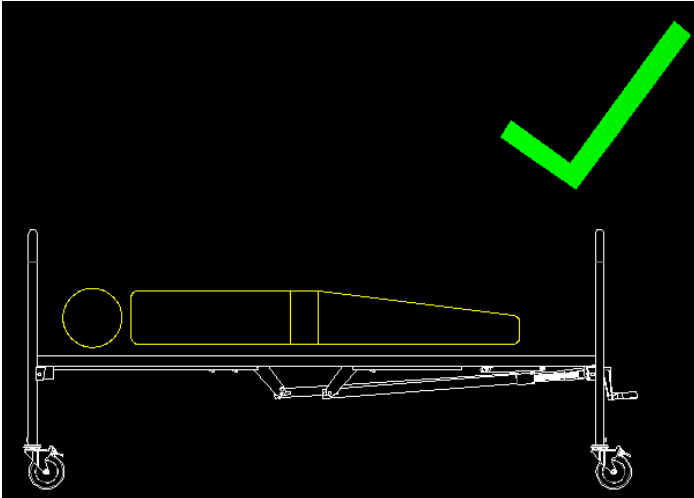

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ:

Με αποκλειστική μας ευθύνη δηλώνουμε ότι τα αναφερόμενα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα στην παρούσα δήλωση είναι χαμηλής Κατηγορίας Διακινδύνευσης (Risk Class I) και πληρούν τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 745/2017 και κατά περίπτωση τα αναφερόμενα πρότυπα και νομοθεσία.

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ:

Οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό προκύψει σε σχέση με τη χρήση της συσκευής, θα πρέπει να αναφερθεί στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους-μέλους στο οποίο διαμένει ο χρήστης και/ή ο ασθενής.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη χωρητικότητα φορτίου για οποιονδήποτε λόγο.
- Όταν κατεβάζετε το κεφάλι ή το τμήμα του ποδιού, βεβαιωθείτε ότι κανένας δεν εισάγει χέρια, πόδια ή άλλα μέρη σώματος κάτω από τη βάση του κρεβατιού.
- Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια δαπέδου που στηρίζει το κρεβάτι είναι επίπεδη

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ:

1. Ελέγξτε εάν ο σκελετός έχει υποστεί ζημιά, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής χρήση του προϊόντος. Δεν υπάρχουν ρωγμές ή σπασίματα στο σκελετό,
2. Σε περίπτωση ζημιάς, μην χρησιμοποιήσετε το προϊόν και επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο και εκπαιδευμένο αντιπρόσωπο
3. Ελέγξτε εάν το προϊόν έχει συναρμολογηθεί σωστά και όλες οι βίδες είναι ασφαλείς και καλά βιδωμένες.
4. Ελέγχετε πάντα την κατάσταση φθοράς των μηχανικών μερών έτσι ώστε να διασφαλίζεται η απόλυτα ασφαλής χρήση του προϊόντος για ανθρώπους και αντικείμενα.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ:

Χρησιμοποιήστε στρώματα ή αεροστρώματα σύμφωνα με την γνωμάτευση του Θεράποντος Ιατρού. Το μέγεθος του στρώματος να μην είναι μεγαλύτερο από αυτό του σκελετού το κρεβατιού. Όλα τα στρώματα και αεροστρώματα της MOBIAC είναι κατάλληλα για τα κρεβάτια.




ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι εικονογραφήσεις για την συναρμολόγηση είναι ενδεικτικές για να κάνουν ευκολότερη την συναρμολόγηση ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές από την πραγματικότητα. Στην συσκευασία περιλαμβάνονται εργαλεία για την συναρμολόγηση.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ
1	Κύριος Σκελετός κρεβατιού	1
2	Μανιβέλα ανύψωσης Πλάτης, (μέρος πάνω στο κρεβάτι)	1
3	Μανιβέλα ανύψωσης Ποδιών. (μέρος πάνω στο κρεβάτι)	1
4	Πλαστικά πλαίσια πλαϊνών (κεφαλάρι και υποπόδιο)	2
5	Βάση με τις ρόδες	2
6	Ζευγάρι Πτυσσόμενα Κάγκελα	1
7	Στατώ Ορού	1
KIT ΒΙΔΩΝ		
A	Βίδες για την Στερέωση των Κάγκελων.	4
B	Πείρος, μακρύς, και καρφίτσα για τη στερέωση της Μανιβέλας στο πλαίσιο του Κρεβατιού	2
C	Πείρος, κοντός, και καρφίτσα για τη στερέωση των υπομοχλίων στο τμήμα της πλάτης, που είναι στο πλαίσιο του Κρεβατιού	2




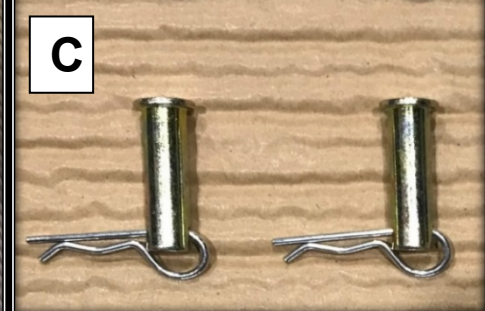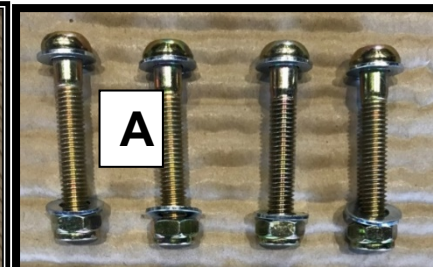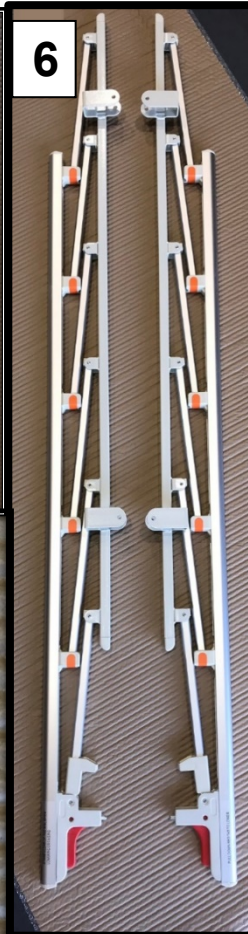

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΒΗΜΑΤΑ:

1. Ανοίξτε την συσκευασία και αφαιρέστε όλα τα επιμέρους τμήματα του προϊόντος, εκτός από τον κύριο σκελετό, σε μία άκρη.
2. Ελέγξτε ότι το περιεχόμενο Συμφωνεί με την παραπάνω λίστα περιεχομένων.
3. Χωρίς να αφαιρέσετε τον Κύριο σκελετό από το χαρτοκιβώτιο, τοποθετήστε τη Βάση με τις ρόδες "5" στις υποδοχές του σκελετού
4. Πιέστε προς τα κάτω έτσι ώστε να εφαρμόσει το μέρος στην βάση.



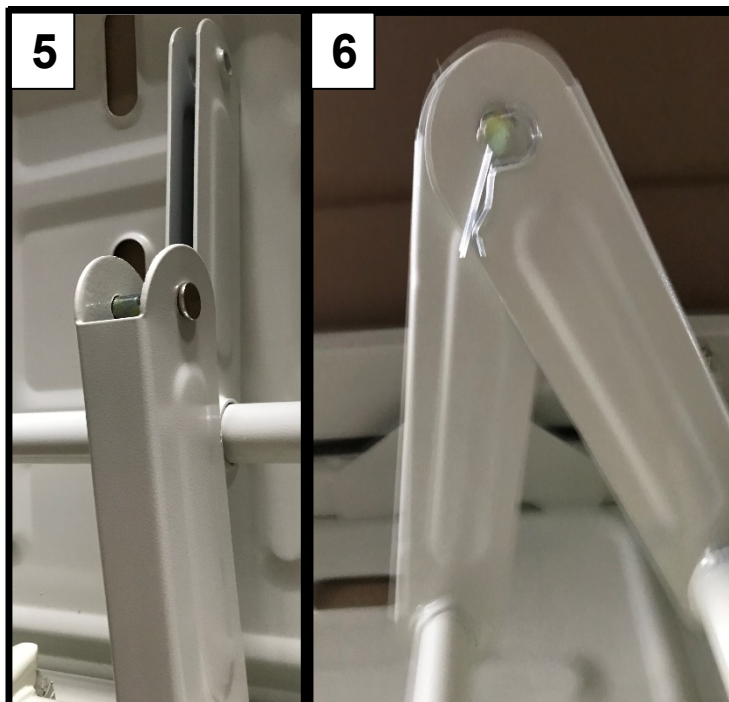

5

6




9



10



11

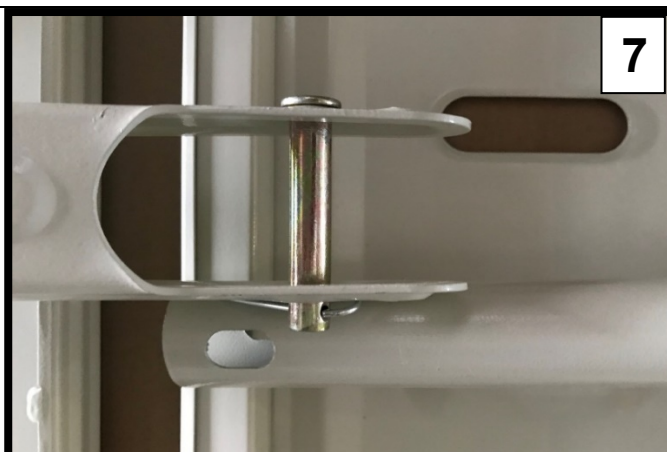

7



8

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΒΗΜΑΤΑ:

6. Τοποθετήστε τους κοντούς πείρους "C" για να ενώσουμε τα υπομόχλια στο τμήμα της πλάτης και ασφαλίστε. Όπως δείχνουν οι εικόνες: #5 έως #6

7. Ενώστε την μανιβέλα της πλάτης χρησιμοποιώντας τους πείρους "B", όπως τις εικόνες #7 & #8.

8. Ενώστε την μανιβέλα των ποδιών χρησιμοποιώντας τους πείρους "B", όπως τις εικόνες #9 & #10.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΒΗΜΑΤΑ:




9. Χωρίς να αφαιρέσετε τα δερματικά, βγάλτε το κρεβάτι από την κούτα και γυρίστε το από την σωστή πλευρά.

10. Αφαιρέστε τα δερματικά και Περιστρέψτε τις λαβές της μανιβέλας "2" & "3" δεξιόστροφα για να σηκώσετε λίγο τα τμήματα, έτσι ώστε να τοποθετήσετε τα κάγκελα "6" ευκολότερα.

11. Τοποθετήστε τα κάγκελα "6" στο επιθυμητό ύψος με την λαβή ασφαλείας να είναι στην μεριά των ποδιών.

12. Βιδώστε και ασφαλίστε με τις βίδες "A" με τα εργαλεία που υπάρχουν στην συσκευασία.

Όπως δείχνουν οι εικόνες: #11 έως #15

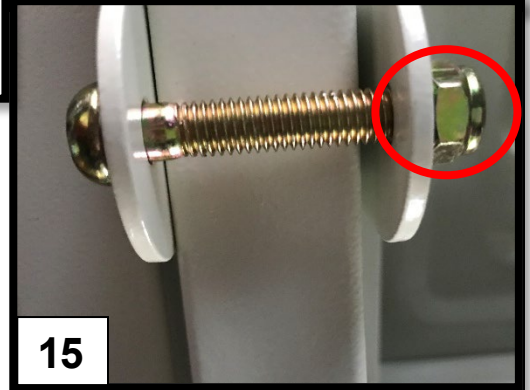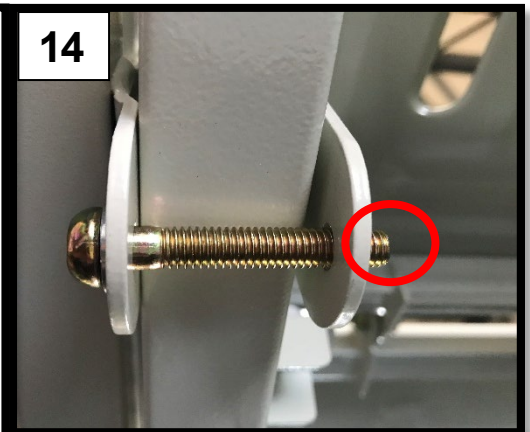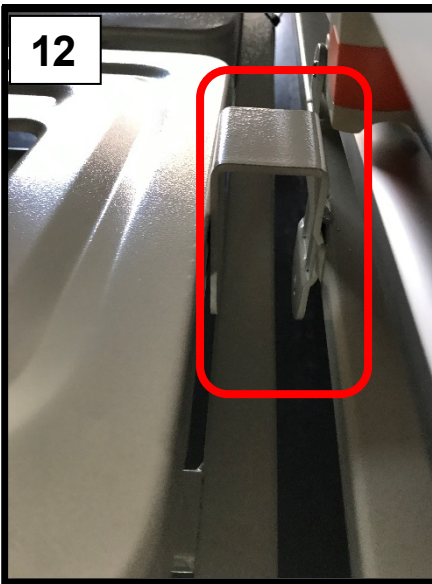

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΒΗΜΑΤΑ:

13. Τοποθετήστε τα Πλαστικά Πλαίδια πλαϊνών (κεφαλάρι και υποπόδιο) "4" στις ειδικές σιδερένιες υποδοχές του κρεβατιού που βρίσκονται στα αντίστοιχα τμήματα.

14. Πιέστε ελαφρά προς τα κάτω για να ασφαλίσουν.

15. Βαλτέ την ασφάλεια.

Όπως δείχνουν οι παρακάτω εικόνες: #16 έως #19


Το Κρεβάτι είναι συναρμολογημένο και έτοιμο για χρήση.

ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ:

Ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται παραπάνω με την αντίστροφη σειρά.

Ενεργοποίηση φρένου:
πατήστε το μοχλό ενεργοποίησης φρένου προς τα κάτω με το πόδι σας.


Απελευθερώνοντας φρένα:
πατήστε το μοχλό απενεργοποίησης φρένου προς τα κάτω με το πόδι σας.

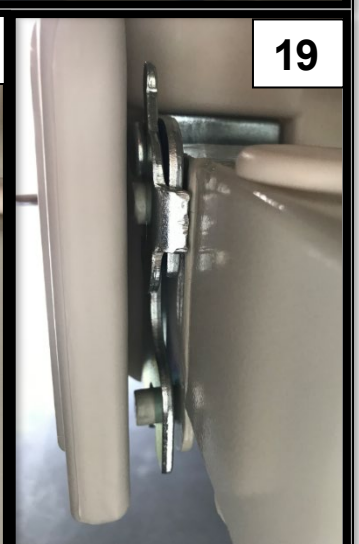

ΧΡΗΣΗ ΜΑΝΙΒΕΛΑΣ:

- Τραβήξτε τη λαβή προς τα έξω.
- Περιστρέψτε τη λαβή δεξιόστροφα για να σηκώσετε το τμήμα και αριστερόστροφα για να το χαμηλώσετε.
- Πέστε τη Λαβή προς τα μέσα αφού ρυθμίσετε την κλίση, για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμούς.
- Η αριστερή μανιβέλα ρυθμίζει την κλίση στο τμήμα της πλάτης και η δεξιά μανιβέλα στο τμήμα των ποδιών.

Όπως δείχνουν παρακάτω οι εικόνες: #20 έως #23

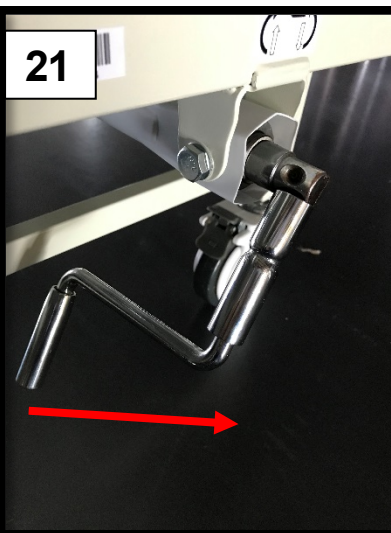

ΣΤΑΤΩ ΟΡΟΥ:

Τοποθετήστε το Στατώ ορού "7 που περιλαμβάνεται στην συσκευασία στις ειδικές υποδοχές που υπάρχουν στις άκρες του κρεβατιού.


Όπως δείχνουν οι εικόνες: #24 έως #25.

Για να τοποθετήσετε τον Αναρτήρα με πλαστική λαβή στο κρεβάτι***:

1. Πρέπει να προμηθευτείτε ξεχωριστά τον αναρτήρα 0805423 και την βάση 0805432.
2. Συναρμολογήστε τον αναρτήρα 0805423 που έρχεται σε τρία μέρη,
3. Βιδώστε την Βάση 0805432 στην ειδική υποδοχή του κρεβατιού, δεξιά ή αριστερά.
4. Περάστε τον αναρτήρα μέσα στον σωλήνα με τις εγκοπές για να στερεωθεί.

Όπως δείχνουν οι εικόνες: #26 έως #31

***** Μπορούμε να προσαρμόσουμε τη Βάση Αναρτήρα σε Κρεβάτι με ημερομηνία παραγωγής από 15 Μάρτιου 2021 και μετά.**

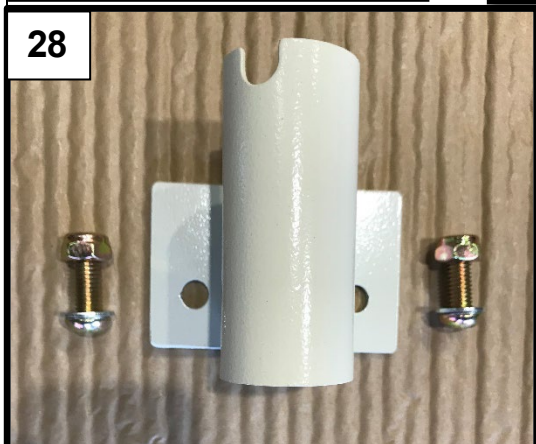

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ:

Χρησιμοποιείτε μόνο ένα υγρό πανί και ήπιο σαπούνι στις επιφάνειες όπου χρήζουν καθαρισμό. Στη συνέχεια στεγνώστε καλά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

ΜΗΝ αφήνετε το προϊόν βρεγμένο.

Μην χρησιμοποιείτε χημικά καθαριστικά για τον καθαρισμό του πλαισίου. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην επιφάνεια της επίστρωσης του κρεβατιού.

Εάν πρέπει να απολυμάνετε το προϊόν, χρησιμοποιήστε ένα κοινό, ήπιο απολυμαντικό

Προστατέψτε το προϊόν από εκδορές, κοψίματα και τρυπήματα



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ:

Εάν διαπιστώσετε ότι το προϊόν σας χρειάζεται αντικατάσταση ή δεν σας χρησιμεύει πλέον, σκεφτείτε την προστασία του περιβάλλοντος:

- 1) Μην πετάξετε το προϊόν σας μαζί με τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα (αυτή είναι και η σημασία του αναγραφόμενου συμβόλου ανακύκλωσης).
- 2) Απευθυνθείτε στην Δημοτική Αρχή σας για να σας υποδείξει τα σημεία διάθεσης του προϊόντος σας για ανακύκλωση.
- 3) Διαθέτοντας τον άχρηστο πλέον προϊόν σας στα σωστά σημεία ανακύκλωσης βοηθάτε στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και στην εκμετάλλευση εκ νέου των υλικών του προϊόντος σας.

ΕΓΓΥΗΣΗ:

Το προϊόν φέρει εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία αγοράς.

Η εγγύηση καλύπτει εργοστασιακές βλάβες & ΔΕΝ καλύπτει βλάβες που προέρχονται από κακή χρήση, κακή συντήρηση, τροποποίηση, κατάχρηση ή και μη συμμόρφωση με τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος.

Επίσης ΔΕΝ καλύπτει φθειρόμενα μέρη όπως την ταπετσαρία, ρόδες, φρένα, ξύλο ή πλαστικά μέρη και ότι μπορεί να φθαρεί κατά την διάρκεια της χρήσης ή με το πέρασμα του χρόνου.

Επίσης δεν καλύπτονται εντός εγγύησης ζημιές ή ελαττώματα που προκαλούνται από: φυσικές καταστροφές, μη εξουσιοδοτημένη συντήρηση ή επισκευή, προβλήματα τροφοδοσίας (όπου προβλέπεται), εταιρίες μεταφορών.

Καμία εργασία ή ανταλλακτικό δεν καλύπτεται αν δεν έχει ελεγχτεί από εξουσιοδοτημένο σέρβις ή τον κατασκευαστή του προϊόντος. Τα έξοδα μεταφοράς για τον έλεγχο πληρώνονται από τον χρήστη ή πελάτη ή από το κατάστημα λιανικής.

ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ			
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:			
ΗΜ/ΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ:		ΤΗΛΕΦΩΝΟ:	
ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ:			
LOT :			
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ			
ΕΠΩΝΥΜΙΑ:			
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:			
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:			
		ΣΦΡΑΓΙΔΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ	



MOBIAC S.A.
ΚΑΘΙΑΝΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ, ΧΑΝΙΑ - ΚΡΗΤΗ
KATHIANA AKROTIRIOU CHANIA - CRETE
T: +30 28210 63222 | WEB: www.mobiakcare.com



ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE:

Posteľ 0805424 je určená pre pacientov, ktorí majú zdravotné problémy a potrebujú zostať ležať na lôžku. Je určená tiež pre ľudí, ktorí sa potrebujú zo zdravotných dôvodov alebo invalidity liečiť v domovoch dôchodcov, nemocniciach alebo aj v zdravotníckych zariadeniach.

Bola vyvinutá aj ako podporné riešenie pre domácu starostlivosť.





POZOR (!):

- V prípade poškodenia alebo poruchy vášho produktu NEPOUŽÍVAJTE produkt a obráťte sa na autorizovaného a vyškoleného zástupcu.
- Výrobok nepoužívajte na účely, ktoré nie sú uvedené v tomto návode.
- MOBIAS S.A odmieta akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek následky vyplývajúce z nesprávneho používania tohto produktu a z neoprávnených úprav rámu produktu.
- MOBIAS S.A si vyhradzuje právo zmeniť informácie uvedené v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.
- Pripúšťa sa $\pm 3\%$ odchýlka rozmerov produktov.

VŠEOBECNÉ UPOZORNENIA:

- Ak nečítate túto používateľskú príručku, je lepšie nepoužívať tento produkt ani inú jeho časť. Ak nerozumiete použitiu alebo preventívnym opatreniam, obráťte sa pred použitím produktu na predajcu alebo príslušného technika, pretože môže dôjsť k poškodeniu.
- Výrobok uchovávajte mimo dosahu zdrojov tepla.
- Uložte si tento dokument pre budúce použitie.
- Buďte opatrní, keď sú v blízkosti detí a nedovoľte deťom hrať sa s výrobkom.
- Neprekračujte maximálne užitočné zaťaženie.
- Venujte osobitnú pozornosť pohyblivým častiam, ktoré môžu spôsobiť privretie končatín a zranenie.
- Nepokúšajte sa zdvihnúť produkt za odnímateľné časti.

OBRÁZKY SPRÁVNEHO A NESPRÁVNEHO POUŽÍVANIA PRODUKTU:

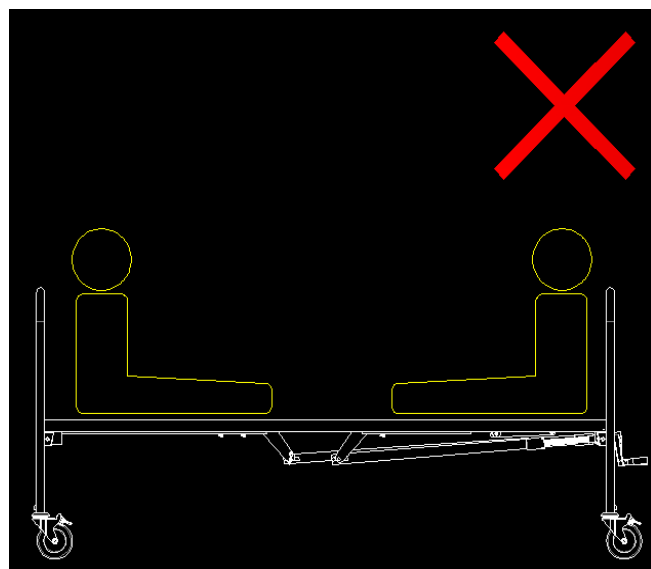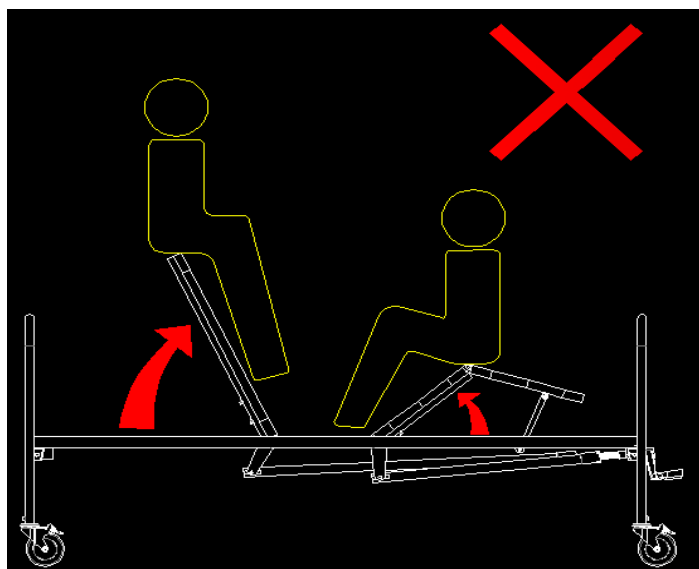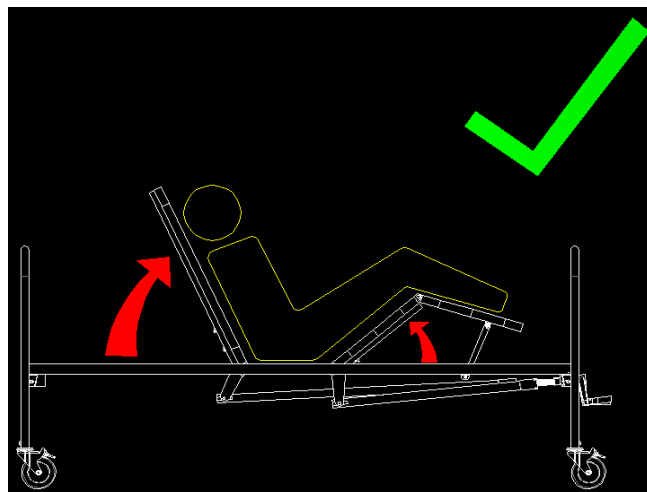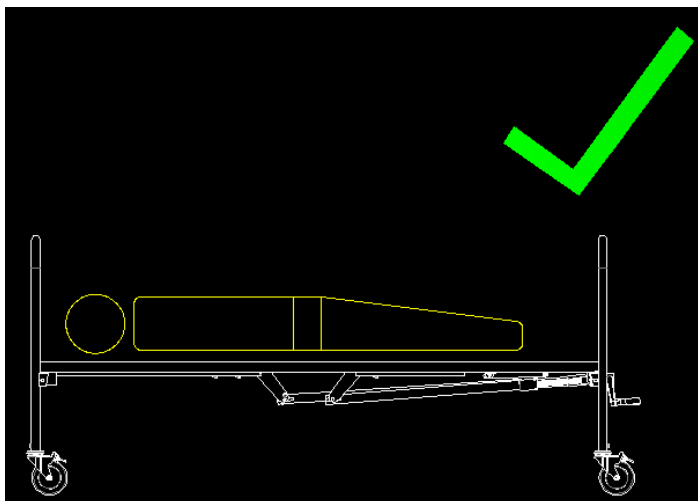

VYHLÁSENIE O ZHODE:

Zodpovedne vyhlasujeme, že zdravotnícke pomôcky uvedené v tomto vyhlásení patria do triedy nízkeho rizika (trieda I) a spĺňajú požiadavky európskeho nariadenia 745/2017 a uvedené normy a právne predpisy.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA POUŽÍVANIE

- Zo žiadneho dôvodu neprekračujte maximálnu nosnosť.
- Pri spúšťaní hlavovej alebo nožnej časti sa uistite, že nikto nevkladá ruky, nohy alebo iné časti tela pod posteľ.
- Uistite sa, že povrch podlahy pod posteľou je rovný.

PRED POUŽITÍM:

1. Skontrolujte, či rám nie je poškodený, aby sa zaručilo bezpečné používanie produktu. (Na ráme nie sú žiadne praskliny ani praskliny).
2. V prípade poškodenia výrobok nepoužívajte a kontaktujte svojho predajcu, ktorý vám poskytne ďalšie pokyny.
3. Skontrolujte, či je výrobok správne zmontovaný a či sú všetky skrutky zaistené a dobre zaskrutkované.
4. Vždy skontrolujte stav opotrebovania mechanických častí, aby ste zaistili absolútne bezpečné používanie výrobku pre ľudí a predmety.

HLÁSENIE INCIDENTU:

Akýkoľvek vážny incident, ktorý sa vyskytne v súvislosti s používaním pomôcky, sa musí nahlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má užívateľ a/alebo pacient bydlisko.

VÝBER MATRACOV

Matrace alebo antidekubitné matrace používajte podľa predpisu ošetrojúceho lekára. Veľkosť matraca by nemala byť väčšia ako rám postele.

Vhodné sú všetky matrace a antidekubitné pomôcky MOBIAK.


MONTÁŽ:

POZNÁMKA: Obrázky zostavy sú orientačné, aby bola montáž jednoduchšia. V realite môžu byť rozdiely. Montážne náradie je súčasťou balenia.

OBSAH BALENIA:

	POPIS	Ks
1	Hlavný rám postele	1
2	Kľuka na opierku chrbta, (časť je už zmontovaná na posteli)	1
3	Kľuka na opierku nôh (časť je už zmontovaná na posteli)	1
4	Plastové čelá (opierka hlavy a opierka nôh)	2
5	Základňa s kolesami	2
6	Skladacie bočnice, pár	1
7	Infúzny stojan	1
SADA SKRUTIEK		
A	Skrutky na inštaláciu bočníc	4
B	Čapy (dlhé) a závlačky na upevnenie kľuky na rám postele.	2
C	Čapy (krátke) a závlačky na upevnenie pák chrbtovej časti v ráme postele.	2




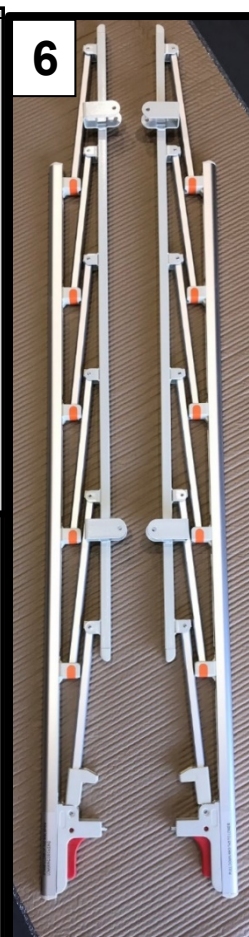


POSTUPOJTE PODĽA NÁSLEDUJÚCICH KROKOV:

6. Otvorte obal a odstráňte všetky časti výrobku okrem hlavného rámu.
7. Skontrolujte, či je obsah v súlade s vyššie uvedeným zoznamom obsahu.
8. Bez toho, aby ste vybrali hlavný rám z kartónu, umiestnite základňu s kolieskami „5“ do otvorov rámu.
9. Zatlačte nadol, aby časť zapadla do štrbiny rámu.
10. Dobre priskrutkujte pomocou nástrojov, ktoré sú v balení.

Ako ukazuje nasledujúci obrázok: # 1 až # 4

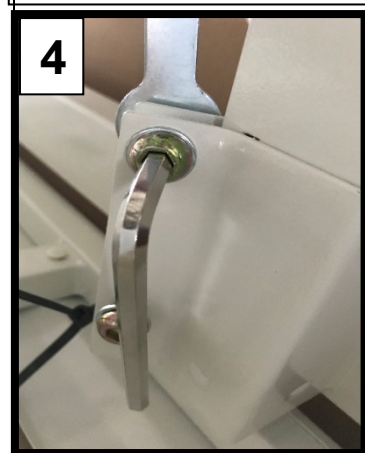

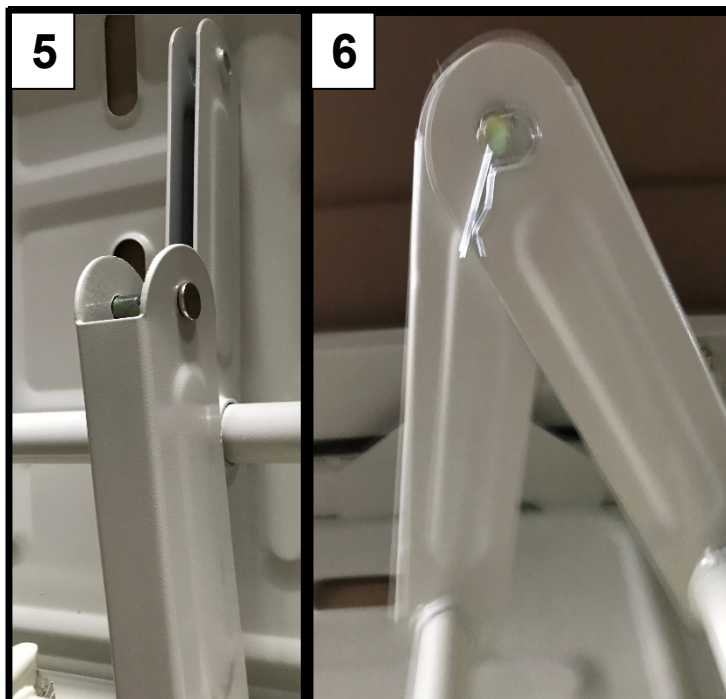

5


6




9



10

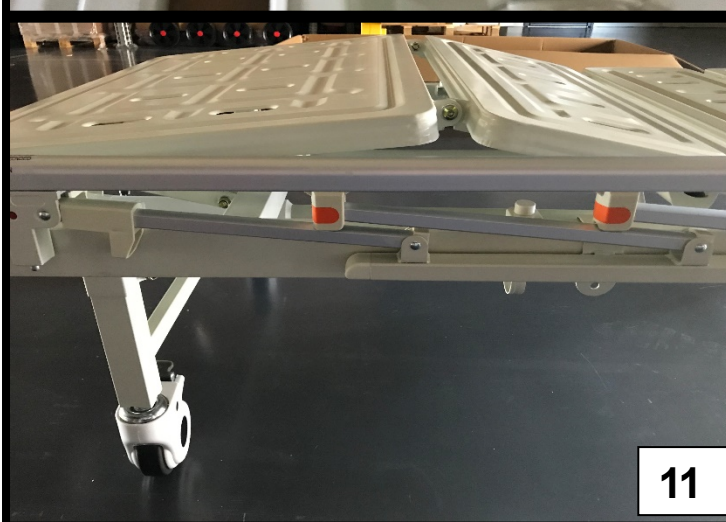

11

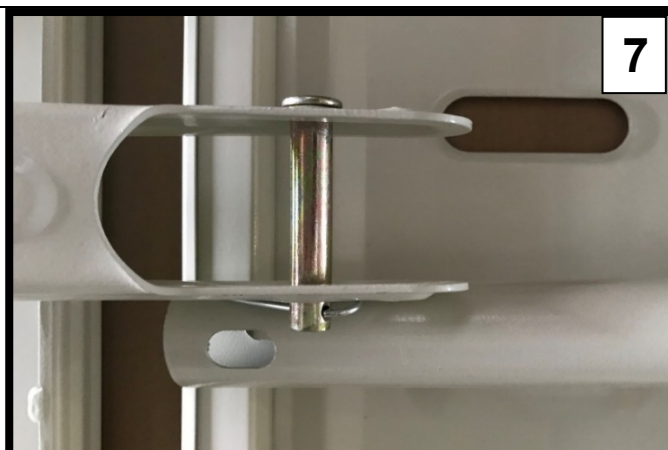

7



8

POSTUPUJTE PODĽA NÁSLEDUJÚCICH KROKOV:

6. Nainštalujte krátke kolíky „C“, aby ste spojili páčky na časti operadla a zaistili. **Ako ukazujú obrázky #5 až #6**

7. Pripevnite kľuku pre opierku B pomocou kolíkov "B", **ako ukazujú obrázky # 7 až # 8**

8. Pripevnite kľuku pre opierku nôh pomocou kolíkov "B", **ako ukazujú obrázky #9 až #10.**

POSTUPUJTE PODĽA NÁSLEDUJÚCICH KROKOV:




9. Bez odstránenia závlačky vyberte lôžko z kartónu a otočte ho na pravú stranu.

10. Odstráňte závlačku a otočte kľuky „2“ a „3“ v smere hodinových ručičiek, aby sa časti mierne zdvihli, aby sa bočnice „6“ ľahšie namontovali.

11. Nainštalujte bočnice "6" do požadovanej výšky, pričom bezpečnostná rukoväť musí byť na boku nôh.

12. Priskrutkujte a zaistite bočnice pomocou skrutiek „A“ pomocou nástrojov, ktoré sú súčasťou balenia.

Ako ukazujú obrázky #11 až #15

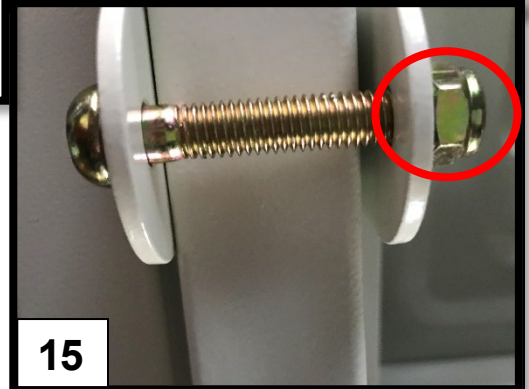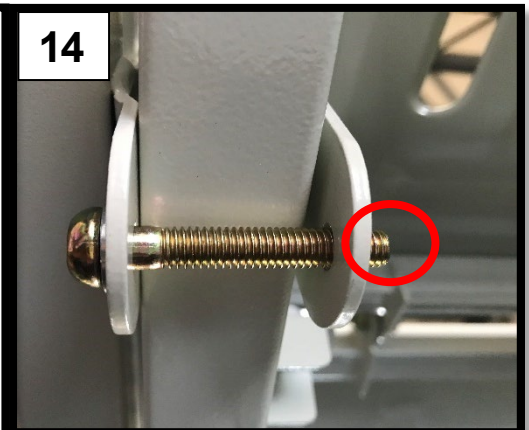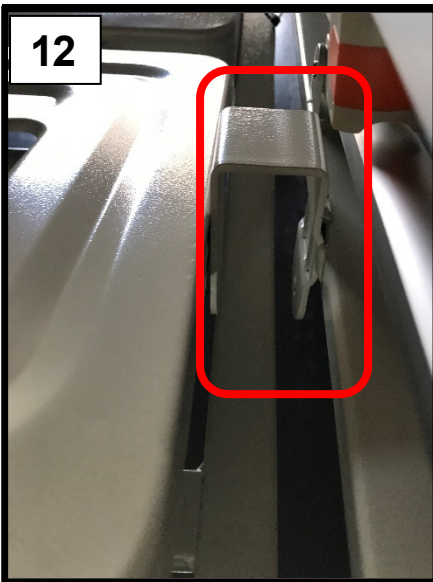

POSTUPUJTE PODĽA NÁSLEDUJÚCICH KROKOV:

13. Nainštalujte plastové čelá postele (hlava a opierka nôh) „4“ do špeciálnych železných objímok postele.

14. Zaistite ľahkým zatlačením.

15. Nasadte bezpečnostný zámok.

Ako ukazujú obrázky #16 až #19

Posteľ je zmontovaná a pripravená na použitie.

DEMONTÁŽ:

Postupujte podľa krokov popísaných vyššie v opačnom poradí.


Aktivácia brzdy: Zatlačte páku aktivácie brzdy nadol nohou.


Deaktivácia brzd: zatlačte páčku deaktivácie brzd nadol nohou.

POUŽITIE KĽUKY:

- v. Vytiahnite rukoväť.
- vi. Otočením rukoväte v smere hodinových ručičiek sekciu zdvihnete a proti smeru hodinových ručičiek ju spustíte.
- vii. Po nastavení sklonu sklopte rukoväť smerom dovnútra, aby ste predišli zraneniam.
- viii. Ľavou kľukou sa nastavuje sklon opierky chrbta a pravou kľukou opierky nôh.

Ako ukazujú obrázky #20 až #23.

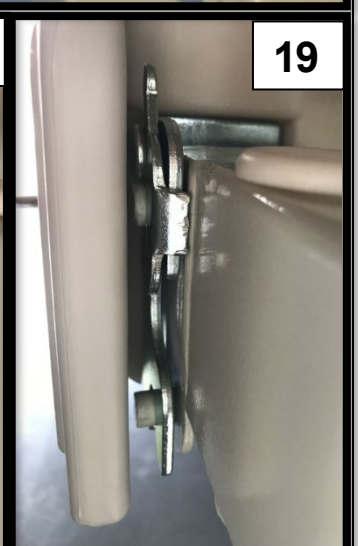

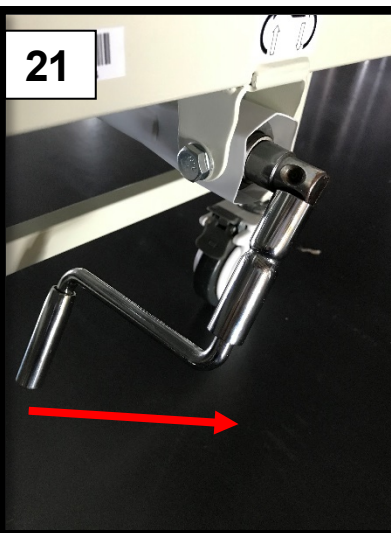

INFÚZNY STOJAN:



Vložte inf. stojan „7“, ktorý je v balení, do špeciálnych otvorov na okraji postele.

Ako ukazujú obrázky #24 až #25.

Umiestnenie zdvíhacej tyče s plastovou rukoväťou na postel***:

5. Tyč 0805423 a základňu 0805432 si musíte zakúpiť samostatne.
6. Zostavte tyč 0805423, ktorá sa dodáva v troch častiach.
7. Naskrutkujte základňu 0805432 na špeciálne lôžkové objímky, ktoré sú vpravo alebo vľavo.
8. Vložte tyč 0805423 do drážkovanej trubice, aby ste ju stabilizovali.

*** Podstavec na zdvíhaciu tyč 0805432 môžeme nainštalovať na posteľ s dátumom výroby od 15.3.2021.

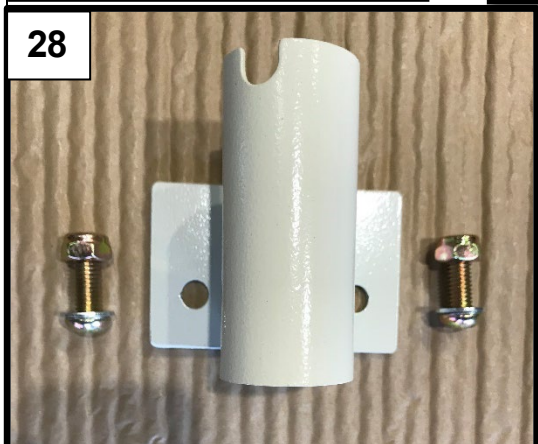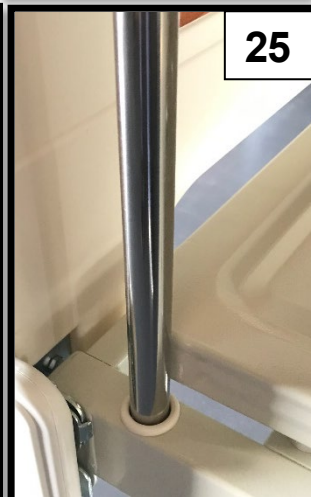

ČISTENIE A DEZINFEKCIA:

Na povrchy, ktoré je potrebné vyčistiť, používajte iba vlhkú handričku a jemné mydlo.

Potom pred použitím produkt dôkladne vysušte.

NENECHÁVAJTE výrobok vlhký.

Na čistenie rámu nepoužívajte chemické čistiace prostriedky. Mohlo by dôjsť k poškodeniu povrchu. Ak potrebujete prípravok dezinfikovať, použite bežný jemný dezinfekčný prostriedok.

Chráňte predmet pred poškrábaním, prerezaním a prepichnutím



OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Ak jedného dňa zistíte, že váš produkt je potrebné vymeniť alebo vám už nefunguje, zvážte ochranu životného prostredia:

- 1) Nelikvidujte svoj výrobok spolu s ostatným komunálnym odpadom (toto je aj význam znázorneného recyklačného označenia).
- 2) Obráťte sa na verejné orgány a tie vám dajú pokyny o recyklačných strediskách, v ktorých musí byť váš produkt zlikvidovaný.
- 3) Správna likvidácia vášho produktu pomáha chrániť životné prostredie, ako aj recyklácia komponentov produktu.

ZÁRUKA:

Na výrobok sa poskytuje záruka dva (2) roky od dátumu zakúpenia.

Záruka sa vzťahuje na výrobné chyby a NEVZŤAHUJE sa na škody spôsobené nesprávnym používaním, nedostatočnou údržbou, úpravami, nadmerným používaním alebo nedodržaním návodu na obsluhu produktu. NEZAHŔŇA časti, ktoré sa môžu opotrebovať počas používania alebo časom, ako sú čalúnenie, kolesá, brzdy, drevené alebo plastové časti.

Na škody alebo závady spôsobené prírodnými katastrofami, neoprávnenou údržbou alebo opravou, problémami s napájaním, dopravcami sa záruka nevzťahuje.

Záruka sa nevzťahuje na žiadnu opravu ani náhradný diel, pokiaľ nebol skontrolovaný autorizovaným servisným oddelením alebo výrobcom produktu. Prepravné náklady na tovar v záruke hradí užívateľ – zákazník alebo predajca.

ZÁRUČNÝ FORMULÁR:

PODROBNOSTI O KUPUJÚCOM			
CELÉ MENO:			
DÁTUM NÁKUPU:		TELEFÓN:	
SÉRIOVÉ ČÍSLO:			
ŠARŽA:			
PODROBNOSTI PREDAJCU			
NÁZOV:	VELCON spol. s r.o.		
ADRESA:	Továrenská 368/40, 976 31 Vlkanová		
TELEFÓN:	048/4141247		
			DÁTUM A PODPIS

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
PRÍLOHA A. VLASTNOSTI A ŠPECIFIKÁCIE

ΜΒΚ ΚÓΔ	GR POPIS	SK POPIS
0805424	ΚΡΕΒΑΤΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΠΟΛΥΣΠΑΣΤΟ	NEMOCNIČNÁ POSTEĽ MANUÁL 2-FUNKCIE
0805423	ΑΝΑΡΤΗΡΑΣ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ	ZDVÍHACIA TYČ S MADLOM
0805432	ΒΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΡΑ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ	ZÁKLADŇA NA ZDVÍHACIU TYČ

0805424

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ	CELKOVÁ DĹŽKA	208 cm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ	CELKOVÁ ŠÍRKA	92 cm
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΗΚΟΣ	VNÚTORNÁ DĹŽKA	200 cm
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ	VNÚTORNÁ ŠÍROKA	89 cm
ΥΨΟΣ (ΜΕ ΤΡΟΧΟΥΣ)	VÝŠKA S KOLIESKAMI	50 cm
ΜΗΚΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΑΤΗΣ	DĹŽKA PRE ZADNÚ ČASŤ	75 cm
ΜΗΚΟΣ ΜΕΣΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ	DĹŽKA PRE STREDNÚ ČASŤ	59 cm
ΜΗΚΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΙΩΝ	DĹŽKA PRE ČASŤ NÔH	54 cm
ΚΛΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΑΤΗΣ/ΛΑΤΗΣ	NAKLÁVANIE CHRBTÁ	75° (+-5°)
ΚΛΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΙΩΝ	SKLON KOLIEN	40° (+-5°)
ΜΑΝΙΒΕΛΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ	KOVOVÁ KĹUKA	2 Ks
ΠΑΝΕΛ ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΙ & ΥΠΟΠΟΔΙΟ	HLAVA-NOHY DOSKA	2 pcs ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΘΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΑ / ODNÍMATEĽNÝ PLAST
ΤΡΟΧΟΙ	KOLESÁ	5" 4 Ks ΜΕ ΦΡΕΝΟ / S/ BRZDAMI
ΣΤΑΤΩ ΟΡΟΥ	INFÚZNY STOJAN	ΝΑΙ / ΑΝΟ
***ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΑΤΩ ΟΡΟΥ & ΣΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ / INFÚZNY STOJAN JE MOŽNÉ UMIESTNIŤ V ŠTYROCH ROHOCH POSTELE.		
ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΓΙΑ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ	HÁČKY NA MOČ	ΝΑΙ / ΑΝΟ
ΜΕΓΙΣΤΟ ΦΟΡΤΙΟ	MAXIMÁLNA ZÁŤAŽ	250 Kg
ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ	VÁHA POLOŽKY (NW)	75 Kg
ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ	CELKOVÁ VÁHA	85 Kg
ΣΚΕΛΕΤΟΣ	RÁM	ΣΙΔΕΡΕΝΙΟΣ / OCEĽ
ΧΡΩΜΑ	FARBA	ΛΕΥΚΟ / BIELA
ΒΑΒΗ	POVRCH	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ / NORMÁLNA ÚDRŽBA
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ	ROZMER KARTÓNU PRE HLAVNÝ RÁM	202x95x19 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΠΛΑΙΝΩΝ	ROZMER KARTÓNU PRE PLASTOVÉ ČELÁ (OPIERKA HLAVY A NÔH	96x55x13 cm

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. ΣΥΜΒΟΛΑ
PRÍLOHA B. SYMBOLY

Ερμηνεία Συμβόλων που Βρίσκονται στην Ετικέτα, στο Χαρτοκιβώτιο ή στις Οδηγίες χρήσης του Προϊόντος
 Popis symbolov, ktoré boli vytlačené na štítku, hlavnej škatuli a/alebo používateľskej príručke.

	Ιατρική Συσκευή Zdravotnícka pomôcka		Σήμα συμμόρφωσης CE CE značka
	Κατασκευαστής Výrobca		Ημερομηνία Παραγωγής Dátum výroby
	Κωδικός Προϊόντος Číslo produktu		Διαβάστε τις Οδηγίες Χρήσης Prečítajte si inštrukcie
	Σειριακός Αριθμός Výrobné číslo		Μην χρησιμοποιείται εάν το κουτί είναι κατεστραμμένο Nepoužívať ak je obal poškodený
	Αριθμός Παρτίδας Číslo šarže		Τοποθετήστε με αυτή τη Φορά Stavať nahor
	Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Jedinečná identifikácia zariadenia		Κρατήστε μακριά από ηλιοφάνεια Nevystavujte slnečnému žiareniu
	Διατηρήστε Στεγνό Udržujte suché		Ύψος στοίβαξης 3 κιβώτια Výška stohovania
	Χειριστείτε με προσοχή Zaobchádzat' opatrne		Εύθραυστο Krehké
	Χρήση Μόνο για Εσωτερικό Χώρο In Door Len na použitie v interiéri		Απόρριψη Ηλεκτρικών Εξαρτημάτων Smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení