



ELEKTRICKÝ VOZÍK

0811316

Návod na použitie



Distribútor: VELCON spol. s r.o.
Továrenská 368/40, 976 31 Vlkánová

Preklad návodu na použitie zabezpečil distribútor VELCON spol. s r.o.

Predslov

Pred uvedením produktu do prevádzky si pozorne prečítajte návod na použitie.

- ✧ Táto príručka obsahuje operácie, spôsoby montáže a jednoduché riešenia porúch.
- ✧ Táto príručka platí pre naše modely: 0811316.
- ✧ Táto príručka obsahuje metódy údržby a samokontroly invalidného vozíka, uložte ju na vhodné miesto.
- ✧ Poskytnite, prosím, tento návod na použitie, keď budú tento invalidný vozík používať iní ľudia.
- ✧ Poznámky a ilustrácie v tejto príručke sa môžu mierne líšiť od skutočných dielov v dôsledku zlepšenia kvality alebo zmeny dizajnu.
- ✧ V prípade nejasností alebo otázok kontaktujte svojho predajcu.
- ✧ Nesprávne používanie vozíka môže viesť k zraneniu. Nebezpečnou jazdou môžete ublížiť sebe aj iným.
- ✧ Elektrický invalidný vozík je určený na pohodlnú prepravu osôb s ťažkosťami pri chôdzi alebo bez schopnosti chôdze.
- ✧ Tento elektrický invalidný vozík je určený len na prepravu 1 osoby.

Symbody použité v tomto návode



Výstražný symbol

Postupujte presne podľa pokynov vedľa tohto symbolu.

Nevenovanie pozornosti týmto pokynom môže viesť k fyzickému zraneniu alebo poškodeniu invalidného vozíka alebo životného prostredia.

1. Predstavenie produktu

1.1 Obrázky produktov



1.2 Informácie o produkte

Výkonnostný parameter

0811316	ŠPECIFIKÁCIA
Rám	Hliník, práškové lakovanie
Ovládač	ovládač 50A
Motor	Linux 200W*2 s elektromagnetickou brzdou
Batéria	Lithium 24V 20AH
Nabíjačka	HP 24V 3A
Maximálna rýchlosť	7 KM/H
Dojazd	15-20 KM
Stupňovateľnosť	10 stupňov
Predné koleso	8" PU
Zadné koleso	12" pevná PU pneumatika
Laktové opierky	Laktová opierka preklopte dozadu
Stupačky	Sklopné dovnútra a von, popruh na päte
Sedadlo	Odnímateľný podsedák
Iné	Blatník, kolesá proti prevráteniu, bezpečnostný pás

Výkon produktu

Táto séria elektrických invalidných vozíkov je poháňaná batériou, poháňaná motorom. Užívatelia ovládajú smer a upravujú rýchlosť pomocou joysticku. Je vhodný pri nízkej rýchlosti, dobrom stave vozovky a malom sklone.

Hlavná štruktúra

Táto séria elektrických invalidných vozíkov sa skladá hlavne z dvoch častí:

- 1) Časť rámu: rám, koleso, opierka nôh, lakťová opierka, operadlo atď.
- 2) Elektrická časť: ovládač, motor, batéria.

Rozsah použitia

Náš elektrický invalidný vozík je určený pre zdravotne postihnutých a starších ľudí (menej ako 120 kg), ktorý sa používa ako pešie vozidlo, je vhodný na vonkajšie použitie na stredné vzdialenosti. Nejazdite po diaľniciach.

2. Bezpečnostné pokyny

2.1 Upozornenie počas jazdy

Všeobecné upozornenia počas jazdy

- Pri ovládaní invalidného vozíka majte ruky na lakťovej opierke.
- Nacvičte si jazdu na bezpečných otvorených miestach, kým nebudete schopní používať invalidný vozík.
- Plne si precvičte jazdu na bezpečnom mieste, aby ste si osvojili princíp pohybu vpred, zastavovania a otáčania.
- Pri jazde po ceste vás sprevádzajú opatrovatelia a overte si, že je to bezpečné.
- Prosíme, dôsledne dodržiavajte pravidlá cestnej premávky pre chodcov, nepovažujte sa za vodiča vozidla.
- Jazdite prosím po chodníku a prechode pre chodcov. Nejazdite v pruhu pre vozidlá.
- Jazdite plynule, aby ste sa vyhli jazde v línii „Z“ alebo ostrej zákrute.
- Správne udržiavajte tlak v pneumatike. Abnormálny tlak v pneumatikách môže spôsobiť nestabilnú jazdu alebo nadmernú stratu prítlaku.

V sprievode opatrovateľov alebo sa vyhýbajte jazde v týchto podmienkach

- Jazdite v zlom počasí, ako je daždivý deň, silná hmla, silný vietor, sneženie atď.
- V prípade, že je invalidný vozík mokrá, ihneď utrite vodu.
- Jazda po zlom stave vozovky, ako je blato, chodník, piesočná cesta, štrk atď.
- Jazda po preplnenej ceste.
- Jazda po priekope bez plota, rybníku atď.
- Cez železniciu.
- Keď musíte prejsť cez železniciu, zastavte sa na odbočke, aby ste sa uistili, že je to bezpečné, a uistite sa, že pneumatiky nebudú prilepené na železniciu.
- Elektrický invalidný vozík je len na osobné použitie, nepreváža ľudí ani tovar a nie je určený na ťahanie.

Preventívne opatrenia pre jazdu do kopca a z kopca

- Vyhnite sa jazde na nasledujúcich miestach: strmé kopce, naklonené miesta, vysoké schody, kanály atď.
- Vyhnite sa jazde na strmých svahoch; rozsah sklonu by mal byť menší ako 9 stupňov. Pri jazde na svahoch používajte ovládač opatrne.
- Pokračujte v pohybe vpred počas stúpania alebo klesania.
- Počas zjazdu znížte rýchlosť.
- Vyhnite sa jazde do strán na strmom mieste.
- Zakáždite jazdu po schodoch a vyhýbajte sa prekračovaniu vysokých schodov.
- Vyhnite sa prechádzaniu širokými priekopami.
- Pri prejazde priekopami dodržujte uhly 90° medzi pneumatikami a priekopami.



Neprepínajte invalidný vozík do manuálneho režimu počas stúpania a klesania.

V prípade poruchy invalidného vozíka na križovatke okamžite požiadajte o pomoc okoloidúceho. A nastavte invalidný vozík do manuálneho režimu, potom odtlačte invalidný vozík, aby opustil cestu, alebo aby používateľ okamžite odišiel z miesta na bezpečné miesto.

Opatrenia pre opatrovateľov

- ♦ Opatrovatelia by sa mali uistiť, že nohy užívateľov sú v správnej polohe na opierkach nôh a zabezpečiť, aby sa oblečenie neprichytilo ku kolesám.
- ♦ Opatrovatelia by mali tlačiť invalidný vozík, aby sa pohol dopredu, aby zostal v bezpečí na strmom svahu alebo dlhom svahu.

2.2 Iné oznámenie

Oprava a reforma

Ak je potrebná oprava a úprava, kontaktujte svojho predajcu. Neupravujte sami, mohlo by to viesť k nehode alebo poruche.

Chráňte životné prostredie

V záujme ochrany životného prostredia nevyhadzujte náhodne opustený invalidný vozík a vyradenú batériu. Pre výmenu novej batérie kontaktujte svojho miestneho predajcu.

Skladovacie prostredie udržiavajte v suchu

Invalidný vozík neskladujte vo vlhkom stave, napríklad v blízkosti kúpeľne. Ak sa invalidný vozík namočil v daždi, okamžite utrite vodu.



Nevymieňajte diely ani materiál náhodne.

Nepridávajte hmotnosť náhodne, v prípade, že by ste spôsobili nerovnováhu.

Nepoužívajte iné vozidlo na ťahanie alebo tlačenie invalidného vozíka, keď na vozíku niekto sedí alebo je vozík v manuálnom režime.

Ak zaznie nezvyčajný zvuk, okamžite kontaktujte servis.


Ochrana pred elektromagnetickým rušením

Invalidný vozík by mal byť mimo dosahu silných magnetických polí a veľkých indukčných elektrických zariadení, ako je rozhlasová stanica, televízna stanica, podzemná rozhlasová stanica, rozhlasová stanica vysielajúca mobilný telefón. Venujte pozornosť tomu, ak sú v blízkosti zdroje elektromagnetického rušenia, tak ďaleko od týchto zdrojov, aby ste predišli elektromagnetickému rušeniu. Elektrický invalidný vozík by mal byť chránený pred elektromagnetickým rušením.

3. Nastavenie invalidného vozíka


Skladací invalidný vozík

Krok 1: Zapnite smerom nahor ako na obrázku 1.

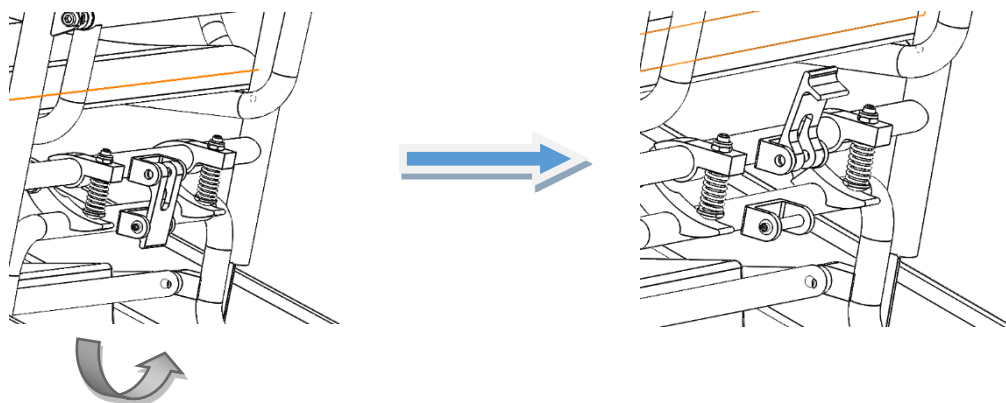


Krok 2: Stlačte rúrku operadla ako na obrázku 2, aby sa úplne zložila.

Obrázok.1

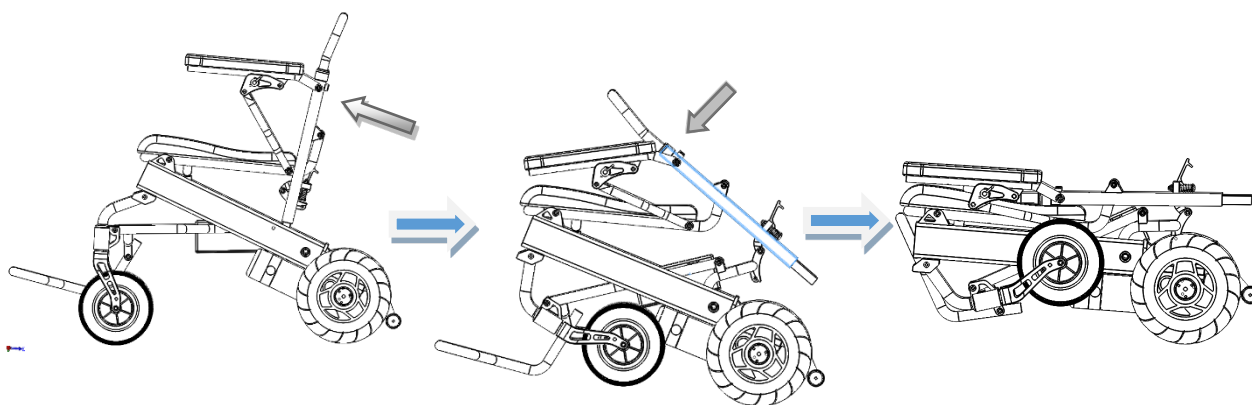


Použitie laktovej opierky

Krok 1: Otočte prepínač nadol

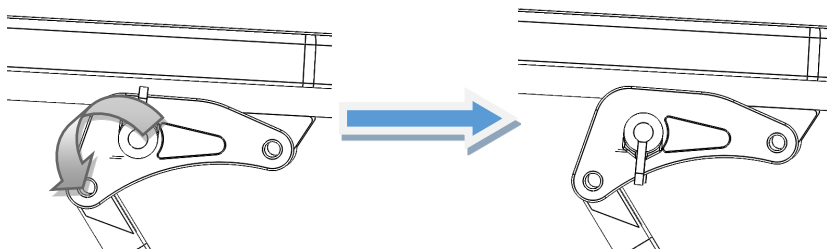

Krok 2: Nadvihnite laktovú opierku

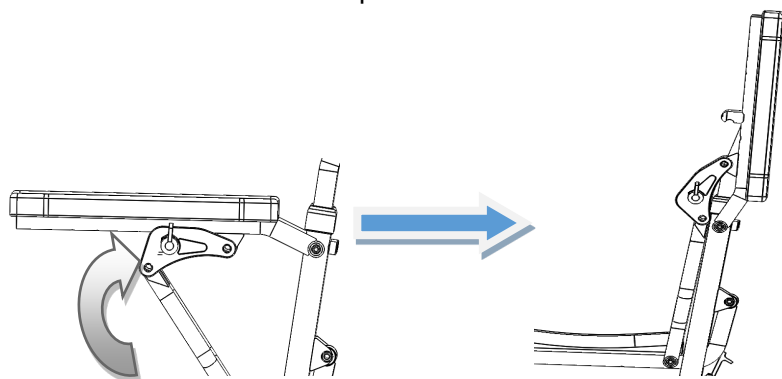

Nastavenie joysticku

Vložte trubicu pod ovládač do trubice pod laktovou opierkou. Nastavte ovládač do perfektnej polohy zaskrutkovaním matice proti smeru hodinových ručičiek (obrázok 3). Po dokončení nastavenia zaskrutkujte maticu.



Obrázok 3

Prepínanie medzi manuálnym režimom a elektrickým režimom



Pri zmene z manuálneho režimu na elektrický sa uistite, že obe bočné spojky sú vo vnútri drážok. Akákoľvek bočná spojka nie je úplne v drážke, môže spôsobiť nebezpečenstvo prevrátenia.

Manuálny režim: vypnite napájanie a zastavte invalidný vozík, otočte nastavovacie páčky tak, aby ukazovali na žltý štítok. (Obrázok 4-1)

Elektrický režim: otočte nastavovacie páčky tak, aby ukazovali na zelený štítok. (Obrázok 4-2)



Obrázok 4-1



Obrázok 4-2



Neprepínajte invalidný vozík do manuálneho režimu, keď používateľ jazdí na svahoch.

4. Batéria a nabíjačka

4.1 Batéria

Batérie sú už zmontované. Dá sa zložiť bez pohybu batérií.

4.2 Požiadavky na nabíjačku

Nabíjačka slúži na nabíjanie batérie. Počas nabíjania elektrického invalidného vozíka ho nepoužívajte.

Technické údaje nabíjačky

Vstupné napätie: AC220V Výstupné napätie: 24V/DC Výstupný prúd: 3A
±10%

4.3 Používanie nabíjačky

Ak chcete nabiť batériu, pripojte nabíjačku k napájaciemu zdroju a zástrčke skrinky batérie. Na dokončenie procesu nabíjania postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

Krok 1: Uistite sa, že drážka nabíjačky nie je zablokovaná.

Krok 2: Uistite sa, že elektrický invalidný vozík je vypnutý.

Krok 3: Odpojte zástrčky, ktoré spájajú skrinku batérie a ovládač.

Krok 4: Pripojte výstupnú zástrčku nabíjačky k napájacej zástrčke batériového boxu.

Krok 5: Pripojte hlavnú zástrčku nabíjačky k zdroju napájania a rozsvieti sa červené svetlo. Plné nabitie potrebuje 8 až 10 hodín, neprebíjajte viac ako 24 hodín.

Krok 6: Aby ste predišli skráteniu životnosti batérie, nabíjajte batériu aspoň raz za mesiac, keď sa invalidný vozík nepoužíva.



Nepreerušujte nabíjanie, kým sa proces nabíjania nedokončí. Opakované používanie batérie, ktorá nie je úplne nabitá, skráti životnosť batérie, preto by mala byť batéria čo najviac nabitá. Keď je batéria úplne nabitá, indikátor napájania sa rozsvieti na zeleno. Nepreerušujte nabíjanie pred úplným nabitím.

Po dokončení nabíjania vypnite napájanie, inak sa batéria pomaly vybije. Nenabíjajte dlhšie ako 24 hodín. Nadmerné nabíjanie je nebezpečné.



Používatelia by mali dodržiavať nasledujúce pravidlá, aby sa vyhli nebezpečenstvu nabíjania: Elektrický invalidný vozík neobsahuje nabíjačku, použite národnú štandardnú nabíjačku, ktorá

výstupné napätie je 24V, 3A.

Pri nabíjaní by mal byť dobre vetraný. Nevystavujte invalidný vozík slnečnému žiareniu a vlhkému prostrediu.

Rozsah teploty prostredia nabíjania je od 10 °C do 50 °C. Ak je mimo rozsahu teplôt prostredia, batéria nebude fungovať správne a môže sa ľahko poškodiť.

Je normálne, že ventilátor počas nabíjania vydáva zvuk. Je to na chladenie nabíjačky, nebojte sa toho.

Zabráňte vniknutiu tekutiny do nabíjačky počas nabíjania. Okrem toho nekladte nabíjačku na horľavé predmety, ako je palivo, opierka nôh alebo sedák.

4.4 Používanie a údržba batérie

Nesprávna operácia výmeny batérie môže spôsobiť nebezpečenstvo výbuchu. Na výmenu je vhodný len rovnaký alebo odporúčaný typ batérie. Okrem toho sa uistite, že póly batérie sú správne. Kľúčové body na predĺženie životnosti batérie: nabíjajte často, aby bola batéria nabitá. Ak sa invalidný vozík nepoužíva, je lepšie batériu úplne nabiť. Ak prestanete používať na dlhší čas, je lepšie nabíjať dvakrát za mesiac.



Pri nabíjaní batérie sa držte ďalej od plameňov. Plamene môžu spôsobiť požiar alebo výbuch batérie.

Nabíjaním vzniká vodík. Počas nabíjania nefajčite.

Neodpájajte napájací zdroj, keď máte mokré ruky alebo zásuvku, mohlo by to spôsobiť úraz elektrickým prúdom. V prípade nepredvídateľnej nehody, ktorá spôsobí zranenie užívateľa, elektrický invalidný vozík pri nabíjaní nepoužívajte ani na ňom nesedzte.

5. Diagnostika systému

Keď kontrolky LED blikajú, znamená to, že invalidný vozík má abnormality. Abnormality sa môžu vyskytnúť v nasledujúcich častiach: motory, brzdy, batéria, káblové spojenia atď.

Prostredníctvom internej informačnej konzultácie o produkte možno pomocou diagnostického signálu zistiť vlastnosť abnormálneho stavu. Neobvyklú situáciu je možné zistiť bez ďalších servisných nástrojov.

Indikácia zvukového signálu

Popis LED svetla	Význam LED svetla	Vysvetlenie a riešenie
Všetky LED svetlá nesvietia, bez zvuku	Napájanie je vypnuté, invalidný vozík v pohotovostnom režime alebo režime spánku. Napájanie je slabé pri kontakte. Poistka je vypnutá alebo prepálená.	
Všetky LED svetlá svietia	Napájanie je zapnuté a autodiagnostika prebehne, elektrický invalidný vozík môže fungovať dobre.	Menej svietiacich LED diód, menej zostávajúcej energie batérie.
Rozsvieti sa červená kontrolka LED úplne vľavo	Batéria je extrémne nedostatočná.	Okamžite nabiť. Alebo batéria nefunguje správne a nie je možné ju nabíjať.
Dve krátke pípnutia s piatimi kontrolkami dvakrát zablikajú	Motor na ľavej strane nefunguje správne.	Ľavý motor je zle pripojený alebo je odpojený kábel.
Štyri krátke pípnutia a päť kontroliek štyrikrát zabliká	Motor na pravej strane nefunguje správne.	Motor na pravej strane je zle pripojený alebo je odpojený kábel.
Šesť krátkych pípnutí a päť kontroliek šesťkrát zabliká	Regulátor je v stave nadprúdovej ochrany.	Skontrolujte brzdy a skontrolujte, či mechanizmus pohonu motora nie je zaseknutý. Skontrolujte prúd pomocou ampérmetra, ak to nie je nadmerný prúd, možno nefunguje regulátor.

Sedem krátkych pípnutí a päť kontroliek sedemkrát zabliká	Joystick nefunguje správne	Joystick sa neresetuje alebo je uvoľnený konektor.
Osem krátkych pípnutí s piatimi kontrolkami osemkrát zabliká	Ovládač nefunguje správne.	Ohľadom údržby sa obráťte na svojho predajcu.
Deväť krátkych pípnutí a päť kontroliek deväťkrát zabliká	Ovládač nefunguje správne.	Ohľadom údržby sa obráťte na servisné stredisko.


6. Ovládač

6.1 Ovládací panel



6.2 Používanie ovládača

Vypínač

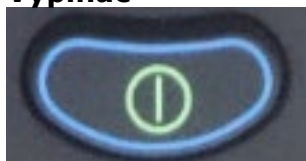

Stlačte toto tlačidlo, indikátory stavu batérie sa rozsvietia zľava doprava. Stlačte znova, všetky LED svetlá zhasnú.



V prípade núdze môžete napájanie vypnúť priamo stlačením tlačidla napájania.

Režim spánku

Ak joystick nepracuje viac ako 20 minút, napájanie sa automaticky vypne a systém je v režime spánku, systém sa prebudí z režimu spánku stlačením tlačidla napájania.

Regulácia rýchlosti



Podľa zvyklostí užívateľa a okolností je rýchlosť jazdy invalidného vozíka nastaviteľná.

Upravte rýchlosť stlačením tlačidla zníženia alebo zvýšenia.

Rýchlosť je rozdelená do piatich sekcií v rozsahu 20 %, 40 %, 60 %, 80 % a 100 % maximálnej rýchlosti.

Prvý prevodový stupeň: 20 % maximálnej rýchlosti.

Piaty prevodový stupeň: 100 % maximálnej rýchlosti.

Tlačidlo klaksónu



Stlačte tlačidlo klaksónu, klaksón bude znieť, kým tlačidlo neuvolníte.

Ukazovateľ stavu batérie



Po zapnutí napájania funguje ukazovateľ stavu batérie. Ukazovateľ stavu batérie tiež zobrazuje zostávajúcu kapacitu batérie.

Ako je znázornené na obrázku, batéria je nabitá.

Keď svieti iba červené alebo žlté LED svetlo, batéria by sa mala nabiť. A pri jazde na dlhé vzdialenosti by mala byť batéria úplne nabitá. Ak svieti iba červené LED svetlo, napájanie batérie je extrémne nedostatočné, používatelia musia batériu čo najskôr nabiť.

Použitie joysticku



Smer pohybu invalidného vozíka je ovládaný joystickom. Rozsah pohybu joysticku tiež riadi rýchlosť pohybu.



Zapnite alebo vypnite napájanie, keď je joystick v strednej polohe. V opačnom prípade regulátor vydá nesprávny prevádzkový signál.

Uvoľnite joystick do stredu a táto chyba sa zastaví. Ak chyba pretrváva, je možné, že táto časť nefunguje správne, nepoužívajte ju a kontaktujte svojho predajcu kvôli údržbe.

7. Údržba

Údržba invalidného vozíka zahŕňa čistenie invalidného vozíka, kontrolné koliesko a batériu a nabitie batérie. Pre ďalšiu údržbu sa obráťte na svojho predajcu. Naším návrhom je kontrola invalidného vozíka raz za pol roka, každoročná generálna oprava.

7.1 Čistenie a údržba batérie

Čistenie invalidného vozíka

Pravidelne čistite invalidný vozík.

Očistite časti, ktoré sa často dotýkajú tela užívateľa (ako sú podušky, laktová opierka, ovládač), čistou a mierne navlhčenou handričkou. Na čistenie nepoužívajte organické rozpúšťadlá.

Ak ide o trpezlivého užívateľa, invalidný vozík by sa mal čistiť raz týždenne. Ak invalidný vozík používa infekčná obeť, mal by byť vyčistený a dezinfikovaný dezinfekčnými prostriedkami.

Kolesá

Pravidelne kontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách a stav ich opotrebovania. Keď sa hĺbka dezénu pneumatiky zníži na 1 mm, vymeňte pneumatiku za novú.

Batéria

Aby ste sa uistili, že je batéria často plne nabitá. V záujme predĺženia životnosti batérie používateľom dôrazne odporúčame, aby nenabíjali, kým sa batéria úplne nevybije.

7.2 Porucha a kontrola invalidného vozíka

Ak dôjde k poruchám počas prevádzky invalidného vozíka, pred kontrolou vypnite napájanie.

Symptóm: úplne vypadne napájanie a všetky kontrolky LED na paneli ovládača nesvietia.

Kontrolný krok:

Krok 1: Skontrolujte, či je zástrčka ovládača uvoľnená.

Krok 2: Skontrolujte, či je uvoľnené spojenie zástrčky ovládača a skrinky batérie. Prosím, znova zasunite zástrčku (pri vyťahovaní zástrčky držte zástrčku. Neťahajte za kábel, aby ste predišli zbytočnému poškodeniu káblového vedenia). Ak po vyššie uvedenej kontrole invalidný vozík stále nie je schopný obnoviť napájanie, alebo ak majú používatelia akékoľvek otázky týkajúce sa vyššie uvedenej kontroly, spojte sa so svojím predajcom.



Regulátor má diagnostický systém na monitorovanie regulátora a motora. Akákoľvek porucha týchto častí je signalizovaná ovládačom. Bližšie informácie nájdete v kapitole o indikácii zvukového signálu.

7.3 Kontrola údržby

Nasleduje kontrolný zoznam. Elektrický invalidný vozík by mal byť riadne skontrolovaný podľa nášho návrhu. Keď nastúpíte alebo vystúpite z invalidného vozíka, automaticky sa vykoná určitá samokontrola. Pre väčšiu pozornosť uvádzame tieto samokontrolné položky najmä v oblasti A.

Oblasť A	Pred použitím skontrolujte, či sú nasledujúce časti správne: 1.Opierka chrbta 2. Lakťová opierka 3. Poloha ovládača 4.Opierka na nohy(stupačka) 5.Napájanie z batérie 6.Nastavovacia páčka na prepínanie medzi manuálnym a elektrickým režimom
Oblasť B	Každý mesiac kontrolujte nasledujúce diely, aby ste predišli strate alebo opotrebovaniu originálnych dielov 1. Skrutky 2. Brzdy 3.Nastavovacia páčka na prepínanie medzi manuálnym a elektrickým režimom 4. Predné a zadné kolesá a ich hĺbka dezénu 5. Konektory ovládača a nabíjačky
Oblasť C	Kvôli bezpečnosti je potrebná celková polročná údržba.

8. Ostatné

Podmienky na prepravu a skladovanie

Počas prepravy a skladovania by mal byť elektrický invalidný vozík správne umiestnený podľa označenia.

- ♦ Pri preprave by sa malo zabrániť vlhkosti a slnečnému žiareniu a mimo zdrojov tepla.
- ♦ V prípade poškodenia elektrických častí vplyvom vlhkosti sa prosím vyhýbajte skladovaniu invalidného vozíka v daždi, vonku a vo vlhku.
- ♦ Podmienky skladovania:
 - Teplota prostredia -40 °C ~ + 55 °C;
 - Relatívna vlhkosť ≤ 80 %;
 - Tlak vzduchu 86 kPa~106 kPa.

HLÁSENIE INCIDENTU:

Akýkoľvek vážny incident, ktorý sa vyskytne v súvislosti s používaním pomôcky, sa musí nahlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má používateľ a/alebo pacient bydlisko.

9. Kontakt

Názov spoločnosti:	MOBIAC SA
Adresa:	KATHIANA AKROTIRIOU
	Telefón: +30 2821 63222
	Email: medicalexports@mobiak.com
Web:	www.mobiakcare.com

Popis symbolov, ktoré boli vytlačené na štítku, hlavnej škatuli a/alebo používateľskej príručke.

	Zdravotnícka pomôcka		CE značka
	Výrobca		Dátum výroby
	Číslo produktu		Prečítajte si inštrukcie
	Výrobné číslo		Nepoužívať ak je obal poškodený
	Číslo šarže		Stávať nahor
	Jedinečná identifikácia zariadenia		Nevystavujte slnečnému žiareniu
	Udržujte suché		Výška stohovania
	Zaobchádzať opatrne		Krehké
	Len na použitie v interiéri		Smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení

10. Záruka

Na výrobok sa poskytuje záruka dva* (2) roky od dátumu zakúpenia.

Záruka sa vzťahuje na výrobné chyby a **NEVZŤAHUJE** sa na škody spôsobené nesprávnym používaním, nedostatočnou údržbou, úpravami, nadmerným používaním alebo nedodržaním návodu na obsluhu produktu. **NEZAHŔŇA** časti, ktoré sa môžu opotrebovať počas používania alebo časom, ako sú brzdy, kolesá a plastové časti.

Poškodenie alebo závady spôsobené: prírodnými katastrofami, neoprávnenou údržbou alebo opravou, problémami s dodávkou (ak je to relevantné), dopravcami nie sú kryté zárukou.

***ŠEŠŤ (6) mesiacov na batériu**

Záruka sa nevzťahuje na žiadny servis ani náhradný diel, pokiaľ nebol skontrolovaný autorizovaným servisným oddelením alebo výrobcom produktu. Prepravné náklady na tovar v záruke hradí užívateľ – zákazník alebo predajca

Reklamačný formulár

PODROBNOSTI O KUPUJÚCICH:			
CELÉ MENO:			
DÁTUM NÁKUPU:		TELEFÓN:	
SÉRIOVÉ ČÍSLO:			
LOT :			
PODROBNOSTI PREDAJCU:			
NÁZOV:	VELCON spol. s r.o.		
ADRESA:	Továrenská 40, 976 31 Vlkanová		
TELEFÓN:	048/ 4141247		
			DÁTUM A PODPIS