

GR SK

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΗΡΕΣ
NÁVOD NA POUŽITIE: CHODÍTKA

MOBIAKCARE®
MEDICAL EQUIPMENT

REF: 0806508
0807998
0809396
0806507

CE

Προοριζόμενη Χρήση:

Οι περιπατητήρες μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άτομα με περιορισμένη κινητικότητα για τις μετακινήσεις εντός και εκτός του σπιτιού.

Συναρμολόγηση:

Οι περιπατητήρες παραδίδονται συναρμολογημένοι & έτοιμοι προς χρήση.

Λοιπές Οδηγίες:

1. Για να διπλώσετε ή να ανοίξετε τον περιπατητήρα, χρησιμοποιείστε τις λαβές ή το κουμπί (εφόσον διαθέτει).
2. Όταν χρησιμοποιείτε τον περιπατητήρα πρέπει να πιέζετε τις λαβές προς τα κάτω, ώστε ο περιπατητήρας να μένει ακίνητος και να μη γλιστρά.
3. Όταν χρησιμοποιείται τον περιπατητήρα πρέπει να στηρίζεστε και στις δύο χειρολαβές ισομερώς. Στήριξη μόνο στο ένα χέρι (και χωρίς συνοδό) μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη λαβή.

Αποθήκευση & Μεταφορά:

Κλείστε και μαζέψτε τον περιπατητήρα, χρησιμοποιόντας τις λαβές ή το κουμπί πριν την αποθήκευσή ή την μεταφορά του

Συντήρηση & Καθαρισμός:

- Καθαρίζετε συχνά κάθε τμήμα του περιπατητήρα.
- Χρησιμοποιείτε μόνο ένα υγρό πανί και ήπιο σαπούνι στις επιφάνειες όπου χρήζουν καθαρισμό.
- Στη συνέχεια στεγνώστε καλά με ένα στεγνό πανί πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
- Εάν πρέπει να απολυμάνετε το προϊόν, χρησιμοποιήστε ένα κοινό, ήπιο απολυμαντικό.

⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ (!):**

Σε περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβλημα **ΜΗΝ** χρησιμοποιείτε τον περιπατητήρα μέχρι να αποκατασταθεί & επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο και εκπαιδευμένο αντιπρόσωπο

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ (!)

Πριν χρησιμοποιήσετε τον περιπατητήρα **ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ** ότι:

- Ο περιπατητήρας βρίσκεται σε πλήρη έκταση & έχει ασφαλίσει σε αυτή τη θέση.
- Οι ρόδες (εφόσον διαθέτει) είναι καλά στερεωμένες.
- Οι χειρολαβές είναι στο ίδιο ύψος και οι βίδες που τις στερεώνουν στο σκελετό είναι καλά σφιγμένες.
- Δεν υπάρχουν ρωγμές ή σπασίματα στο σκελετό.
- Να καθαρίζετε τακτικά τον περιπατητήρα.
- Μην αφήνετε τον περιπατητήρα βρεγμένο.
- Μην αφήνετε παιδιά κοντά στον περιπατητήρα χωρίς επίβλεψη



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Εάν κάποια μέρα διαπιστώσετε ότι το προϊόν σας χρειάζεται αντικατάσταση ή δεν σας χρησιμεύει πλέον, σκεφτείτε την προστασία του περιβάλλοντος:

1) Μην πετάξετε το προϊόν σας μαζί με τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα (αυτή είναι και η σημασία του αναγραφόμενου συμβόλου ανακύκλωσης).

2) Απευθυνθείτε στην Δημοτική Αρχή σας για να σας υποδείξει τα σημεία διάθεσης του προϊόντος σας για ανακύκλωση.

3) Διαθέτοντας το άχρηστο πλέον προϊόν σας στο σωστό σημείο ανακύκλωσης βοηθάτε. στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και στην εκμετάλλευση εκ νέου των υλικών του προϊόντος σας.

Δήλωση Συμμόρφωσης:

Με αποκλειστική μας ευθύνη δηλώνουμε ότι τα αναφερόμενα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα στην παρούσα δήλωση είναι χαμηλής Κατηγορίας Διακινδύνευσης (Risk Class I) και πληρούν τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 745/2017 και κατά περίπτωση τα αναφερόμενα πρότυπα και νομοθεσία.

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ:

Οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό προκύψει σε σχέση με τη χρήση της συσκευής, θα πρέπει να αναφερθεί στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους-μέλους στο οποίο διαμένει ο χρήστης και/ή ο ασθενής.

ΕΓΓΥΗΣΗ:

Το προϊόν φέρει εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα (1) χρόνο από την ημερομηνία αγοράς.
Η εγγύηση καλύπτει εργοστασιακές βλάβες & ΔΕΝ καλύπτει βλάβες που προέρχονται από κακή χρήση, κακή συντήρηση, τροποποίηση, κατάχρηση ή και μη συμμόρφωση με τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος.
Επίσης ΔΕΝ καλύπτει φθειρόμενα μέρη όπως φρένα, παπουτσάκια και ότι μπορεί να φθαρεί κατά την διάρκεια της χρήσης ή με το πέρας του χρόνου.
Επίσης δεν καλύπτονται εντός εγγύησης ζημιές ή ελαττώματα που προκαλούνται από: φυσικές καταστροφές, μη εξουσιοδοτημένη συντήρηση ή επισκευή, προβλήματα τροφοδοσίας (όπου προβλέπεται), εταιρίες μεταφορών.

Φόρμα Εγγύησης

Στοιχεία Αγοραστή

Ονοματεπώνυμο : ……
Ημ/νία Αγοράς: ……**S/N**……
LOT:……**Τηλέφωνο**: ……

Στοιχεία Καταστήματος
Επωνυμία : ……
Διεύθυνση:……
……
Τηλέφωνο: ……

Σφραγίδα καταστήματος

MOBIAK S.A
ΚΑΘΙΑΝΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ, ΧΑΝΙΑ - ΚΡΗΤΗ
KATHIANA AKROTIRIOU CHANIA - CRETE
T: +30 28210 63222 | WEB: www.mobiakcare.com

MOBIAK® MEDICAL • GASES • FIREFIGHTING est. 1977 CE

Zamýšľané použitie:

Chodítka môžu používať ľudia s obmedzenou pohyblivosťou na pohyb v rámci domova aj mimo neho.

Montáž:

Chodítka sú dodávané zmontované a pripravené na použitie.

Ďalšie pokyny:

1. Ak chcete chodítko zložiť alebo rozložiť, použite rukoväte alebo tlačidlo (ak je k dispozícii).
2. Keď používate chodítko na sedenie alebo vstávanie, zatlačte rukoväte nadol, čím zaistíte, že chodítko bude stáť na mieste a nebude sa šmýkať.
3. Keď vystúpite z chodítka, musíte sa spoľahnúť na obe rukoväte rovnako. Naklonenie len k jednej rukoväti (bez sprievodu) môže poškodiť rukoväť.

Skladovanie a preprava:

Pred uskladnením alebo prepravou chodítko zatvorte a zložte pomocou rukovätí alebo tlačidla.

Údržba a čistenie:

- Každú časť chodítka často čistite.
- Na povrchy, ktoré je potrebné vyčistiť, používajte iba handričku a jemné mydlo.
- Potom použite čistú handričku a pred použitím výrobku dobre osušte.
- Ak potrebujete produkt dezinfikovať, použite bežný jemný dezinfekčný prostriedok.

POZOR (!):

V prípade poškodenia alebo poruchy vášho produktu NEPOUŽÍVAJTE produkt a kontaktujte autorizovaného a vyškoleného zástupcu.

DÔLEŽITÉ (!)

Pred použitím chodítka SA UISTITE, že:

- Chodítko je v úplnom vysunutí a v tejto polohe je zaistené.
- Kolesá (ak sú k dispozícii) sú pevne pripevnené.
- Rukoväte sú v rovnakej výške a skrutky, ktoré ich držia na ráme, sú utiahnuté.
- V ráme nie sú žiadne praskliny ani pukliny.
- Chodítko pravidelne čistite.
- Nenechávajte chodítko mokré.
- Nenechávajte deti v blízkosti chodítka bez dozoru.



Ochrana životného prostredia:

Ak jedného dňa zistíte, že váš produkt je potrebné vymeniť alebo vám už nefunguje, zvážte ochranu životného prostredia:
1) Nelikvidujte svoj výrobok spolu s ostatným komunálnym odpadom (toto je aj význam označenia recyklácie).
2) Obráťte sa na svoje verejné orgány a tie vám dajú pokyny o recyklačných strediskách, v ktorých musí byť váš výrobok zlikvidovaný.
3) Správna likvidácia vášho produktu pomáha chrániť životné prostredie, ako aj recykláciu komponentov produktov.

Vyhlásenie o zhode:

Sme výhradne zodpovední za vyhlásenie, že zdravotnícke pomôcky uvedené v tomto vyhlásení patria do triedy nízkeho rizika (trieda I) a spĺňajú požiadavky európskeho nariadenia 745/2017 a aj normy a právne predpisy, na ktoré sa odkazuje.

HLÁSENIE INCIDENTU:

Akýkoľvek vážny incident, ktorý sa vyskytne v súvislosti s používaním pomôcky, sa musí nahlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má používateľ a/alebo pacient bydlisko.

Záruka:

Na výrobok sa poskytuje záruka jeden (1) rok od dátumu zakúpenia.

Záruka sa vzťahuje na výrobné chyby a **NEVZŤAHUJE** sa na škody spôsobené nesprávnym používaním, nedostatočnou údržbou, úpravami, nadmerným používaním alebo nedodržaním návodu na obsluhu produktu. **NEPOKRÝVA** časti, ktoré sa môžu opotrebovať počas používania alebo časom.
Poškodenie alebo závady spôsobené: prírodnými katastrofami, neoprávnenou údržbou alebo opravou, problémami s dodávkou (ak je to relevantné), dopravcami nie sú kryté zárukou.

Záručný reklamačný formulár

Údaje o kupujúcich

Meno: ……
Dátum nákupu: ……**S/N**……..

LOT:……..**Telefón**: ..……..

Údaje predajcu

Meno:
……
……..

Adresa:……
……

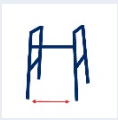
Telefón: …….

MOBIAK S.A
ΚΑΘΙΑΝΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ, XANIA - ΚΡΗΤΗ
KATHIANA AKROTIRIOU CHANIA - CRETE
T: +30 28210 63222 | WEB: www.mobiakcare.com

MOBIAK® MEDICAL • GASES • FIREFIGHTING est. 1977 CE

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
TECHNICKÉ VLASTNOSTI

1. Σκελετός αλουμινίου
   Hliníkový rám
2. Πτυσσόμενος
   Skladacie
3. Ρυθμιζόμενο καθ' ύψος
   Výškovo nastaviteľné
4. Παπουτσάκι πλαστικό Γκρι κωδ:0809553
   Gumová koncovka objímky sivá kód 0809553
5. Ανταλλακτικό μπροστινό ροδάκι για το 0806507 κωδ: 0807621
   Náhradné predné koliesko pre 0806507 kód: 0807621

						
1	**0806508**	53,5 cm	48 cm	48 cm	77-94 cm	100kg
2	**0807998**	54 cm	44 cm	37 cm	88-100 cm	100kg
3	**0809396**	54 cm	46 cm	46 cm	76-93 cm	100kg
4	**0806507**	60 cm	47 cm	52 cm	80-95 cm	100kg

1)



2)



	REF.	GR DESCRIPTION	SK POPIS
1	0806508	ΠΕΡΙΠΑΤΗΡΑΣ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΛΑΒΗ ΣΠΑΣΙΜΑΤΟΣ	Skladacie chodítko
2	0807998	ΠΕΡΙΠΑΤΗΡΑΣ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΛΑΒΕΣ 2 ΕΠΙΠΕΔΩΝ	Skladacie chodítko s 2 úrovňovými rukoväťami
3	0809396	ΠΕΡΙΠΑΤΗΡΑΣ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΣ ΒΗΜΑ-ΒΗΜΑ	Skladacie chodítko, vratný pohyb
4	0806507	ΠΕΡΙΠΑΤΗΡΑΣ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ	Chodítko so skladacími kolesami

3)



4)



Ερμηνεία Συμβόλων που Βρίσκονται στην Ετικέτα, στο Χαρτοκιβώτιο ή στις Οδηγίες χρήσης του Προϊόντος

Popis symbolov, ktoré boli vytlačené na štítku, hlavnej škatuli a v používateľskej príručke

MD	Ιατρική Συσκευή **Zdravotnícka pomôcka**	CE	Σήμα συμμόρφωσης CE **Značka CE**
	Κατασκευαστής **Výrobca**		Ημερομηνία Παραγωγής **Dátum výroby**
REF	Κωδικός Προϊόντος **Kód produktu**		Διαβάστε τις Οδηγίες Χρήσης **Čítajte inštrukcie pred použitím**
SN	Σειριακός Αριθμός **Výrobné číslo**		Μην χρησιμοποιείται εάν το κουτί είναι κατεστραμμένο **Nepoužiť ak je obal poškodený**
LOT	Αριθμός Παρτίδας **Číslo šarže**		Τοποθετήστε με αυτή τη Φορά **Stavať nahor**
UDI	Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος **Jedinečné číslo zariadenia**		Κρατήστε μακριά από ηλιοφάνεια **Chráňte pred slnečným žiarením**
	Διατηρήστε Στεγνό **Udržujte suché**		Ύψος στοίβαξης 3 κιβώτια **Výška stohovania**
	Χειριστείτε με προσοχή **Zaobchádzať opatrne**		Εύθραυστο **Rozbitné**
	Χρήση Μόνο για Εσωτερικό Χώρο **Len na vnútorné použitie**		Απόρριψη Ηλεκτρικών Εξαρτημάτων **Smernice o odpade z elektrických a elektronických zariadení**